

IMBUTI PER FILTRAZIONE - MONOUSO E AUTOCLAVABILI

IMBUTI MONOUSO - [clicca link interattivo](#)

Bioset è un imbuto filtrante graduato, con membrana incorporata ed estraibile. Connessione alla rampa o bottiglia tramite tappo di silicone.

E' un sistema usa e getta, che garantisce una significativa convenienza nelle attività in laboratorio, permettendo di ottimizzare i tempi delle analisi di routine.

Applicazioni:

- analisi microbiologiche di acqua e bevande
- monitoraggio di contaminanti
- test di sterilità di campioni liquidi

Ciascuna unità consiste di:

- un imbuto filtrante graduato
- una base
- un pad di supporto alla membrana
- una membrana
- un coperchio




Dettagli tecnici:

- Pronto all'uso: la durata del test può essere ridotta in modo significativo
- Sistema tutto-in-uno: l'unità filtrante diventa una piastra petri, che può essere incubata
- Facile manipolazione
- Membrana in esteri misti di cellulosa (MCE) con pad di supporto. Diametro dei pori: 0.2, 0.45 oppure 0.8 μm
- Membrana bianca o nera, reticolata
- Imbuto graduato da 100 ml in poliestere traslucido di qualità, leggero, con bordo rinforzato e scanalature interne
- No rischio di contaminazione da ftalati
- Resistente al calore, chimicamente inerte, non idrofobico

Best seller:

FM47MCE045S Imbuto "tutto in uno" da 100 ml con membrana MCE reticolata bianca rimovibile, sterile, pori 0,45 μm , diametro 47 mm. Attacco a tappo di silicone. Conf. singola. 50 pz

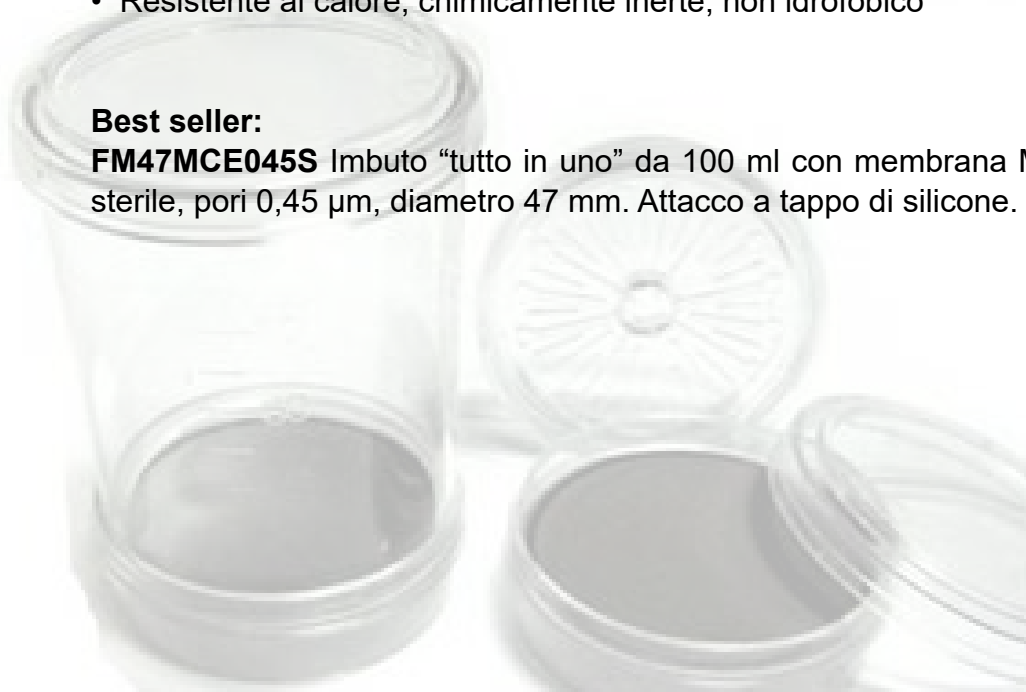

IMBUTI AUTOCLAVABILI - [clicca link interattivo](#)


Gli imbusti Rocker, in acciaio, vetro e PES sono autoclavabili e riutilizzabili più volte.

IMBUTI IN ACCIAIO

Imbusti in acciaio graduati, volume 100, 300 o 500 ml. Coperchio opzionale. Sterilizzabili anche a fiamma.

Gli imbusti hanno un attacco a incastro spin-lock alla propria base filtrante, che a sua volta si connette al sistema filtrante. Vi sono due tipi di connessione:

- Base con attacco con tappo di silicone (imbuto + base filtrante dotata di connessione per tappo di silicone # 8). Il tappo di silicone si adatta a molti sistemi filtranti, rampe e bottiglie
- Base con attacco a incastro spin-lock (imbuto + base filtrante direttamente connessa con le rampe e i sistemi filtranti Rocker).

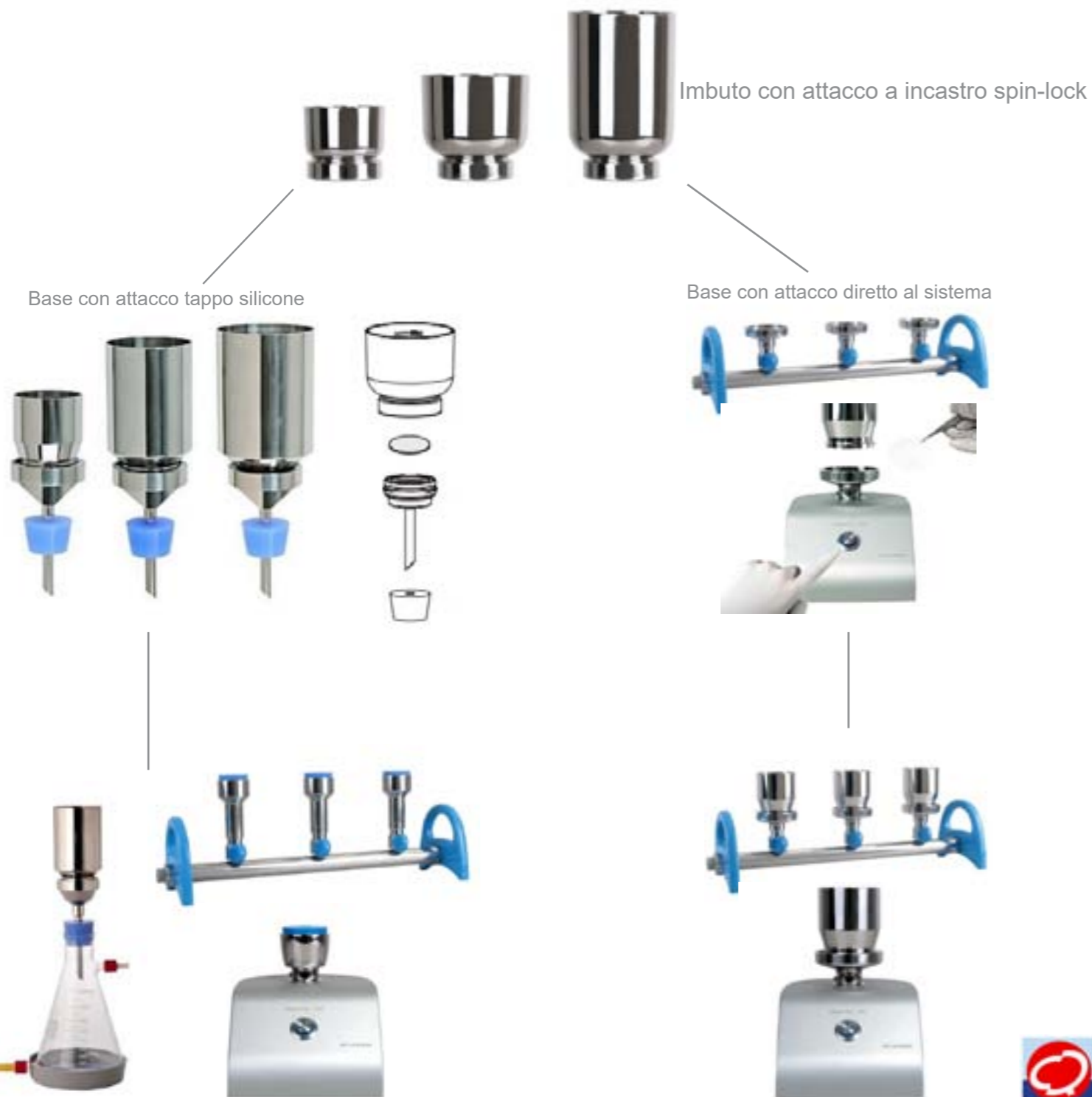

IMBUTI IN PES

Gli imbusti in PES Rocker hanno volume 300 o 500 ml, sono graduati, dotati di coperchio e autoclavabili. Vi sono due tipi di imbuto in PES:

- Imbuto con attacco a incastro spin-lock alla propria base filtrante
- Imbuto con attacco magnetico alla propria base filtrante

Poi, per entrambi i tipi di imbuto e a seconda del modello, la connessione tra base filtrante e rampa (o bottiglia ricevente o sistema filtrante) avviene con:

- Base con attacco con tappo di silicone
- Base con attacco a vite a bottiglie GL45.

Attacco magnetico, facile da usare:

La forte tenuta magnetica consente il funzionamento con una sola mano, previene possibili torsioni e strappi della membrana. Una guida sulla base aiuta a posizionare facilmente la membrana.

Sicurezza:

Imbuto in PES (Poliethersulfone), resistente a un'ampia gamma di sostanze chimiche e ad alte temperature, robusta e infrangibile.

Riutilizzabile:

Resiste a numerosi cicli in autoclave, risparmia denaro ed energia.

Imbuto con attacco a incastro spin-lock



Base con attacco tappo silicone

Imbuto con attacco magnetico



Base con attacco tappo silicone



Base con attacco a vite GL45




IMBUTI IN VETRO



Gli imbusti di vetro hanno volume 15, 300 o 1000 ml. Sono graduati e la connessione alla bottiglia ricevente si ha con una pinza metallica. Il supporto del filtro può essere in vetro o acciaio.



DIAMO UN'OCCIATA AI SISTEMI FILTRANTI ROCKER

[WATERVAC 200 - clicca link interattivo](#)

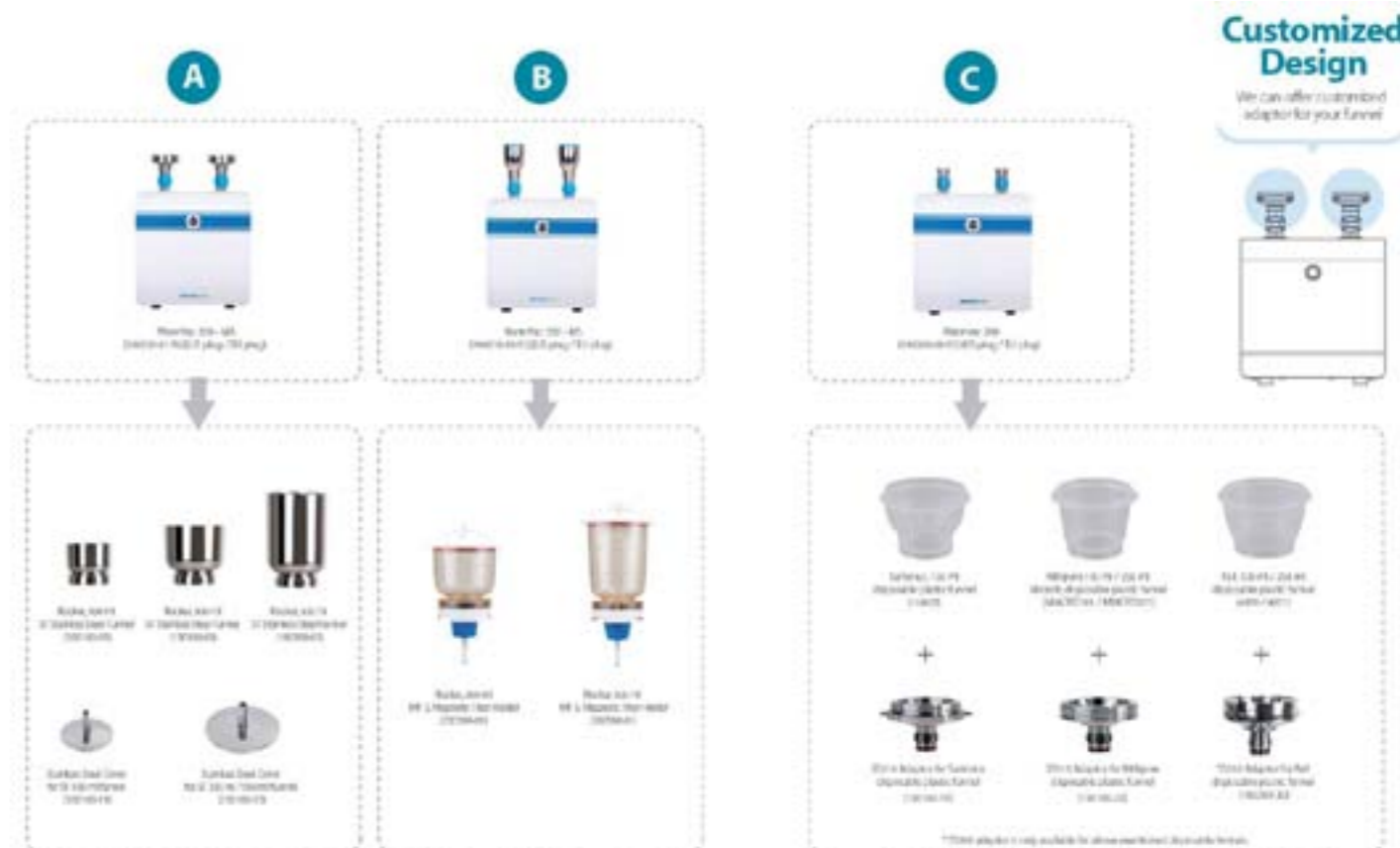

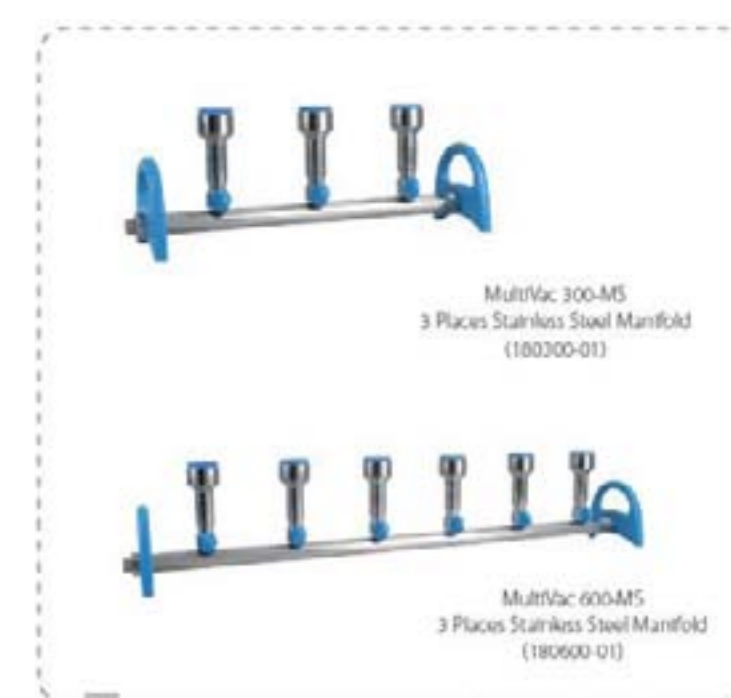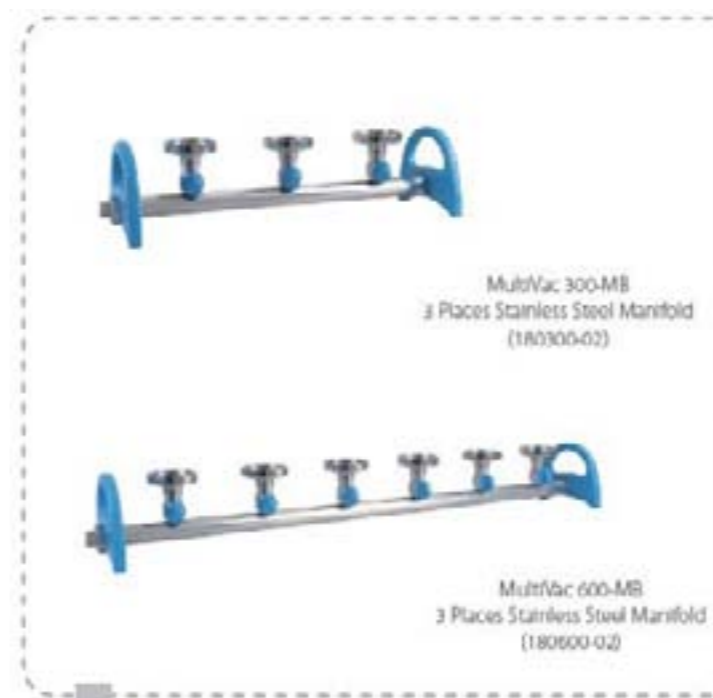

Step 2. Choose the S.S. funnel

Step 2. Choose the filter holder





MultVac 300
3 Places Stainless Steel Manifold
(180300-00)



MultVac 600
6 Places Stainless Steel Manifold
(180600-00)



Step 2. Choose the disposable funnel and adaptor



Sartorius, 100ml
disposable plastic funnel
(16A07)



Millipore, 100ml / 250ml
Microfl, disposable plastic funnel
(MACFD101 / MACFD201)



Pall, 100ml / 250ml
disposable plastic funnel
(4870 / 4871)

+

+

+



Adaptor for Sartorius
disposable plastic funnel
(190100-74)



Adaptor for Millipore
disposable plastic funnel
(190100-73)



Adaptor for Pall
disposable plastic funnel
(190100-75)

Customized Design

We can offer customized adaptor for your funnel

